

Neoss Ø3.25 mm implantat


Neoss smala implantat med diameter 3.25 mm har utformats för att tillgodose det kliniska behovet i trånga utrymmen och vid ersättning av tänder med smala rötter.

Egenskaper hos Ø3.25 mm implantatet:

- *Kompatibilitet* – Ø3.25 mm implantatet har samma starka utformning av distans-implantat kopplingen men i en mindre dimension. Kompatibla skruvmejslar och borrprotokoll minimerar behovet av extra instrument.
- *Prestanda* – Ø3.25 implantatet erbjuder genom ProActive ytan goda behandlingsmöjligheter i mjukt ben och vid direktinstallation där en snabbare osseointegration är önskvärd, vilket har påvisats i in-vivo studier.
- *Stabilitet* – Ø3.25 implantatetskapargoda förutsättningar för en utmärkt initial stabilitet genom den väl beprövade implantatgeometrin från Neoss
- *Flexibilitet* – till Ø3.25 implantatet finns ett brett sortiment av protetiska lösningar vilket inkluderar CAD-CAM, keramiska distanser, individuellt utformade distanser och preparerbara distanser.

Neoss Ø3.25 implantatet har utformats för att optimera det estetiska resultatet vid begränsat interproximalt utrymme eller vid ersättning av tänder med smala rötter.

Användning av 3.25 implantat är kontraindicerat i situationer med höga krafter.

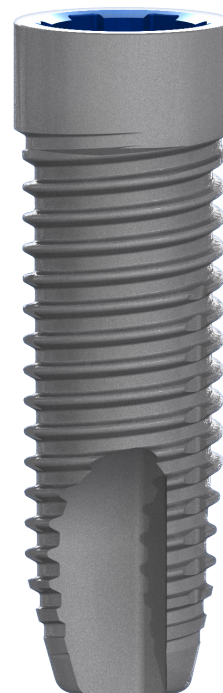

Sortiment

Art.nr	Beskrivning
21176	Implant Kit – ProActive Ø3.25 x 9mm
21177	Implant Kit – ProActive Ø3.25 x 11mm
21178	Implant Kit – ProActive Ø3.25 x 13mm
21179	Implant Kit – ProActive Ø3.25 x 15mm
41141	X-ray Planner Ø3.25
41169	Drill/Instrument Organizer Ø3.25
41139	Countersink Ø3.25
41140	Screw Tap Ø3.25
51142	Implant Inserter Ø3.25 32mm
51143	Implant Inserter Wrench Ø3.25 32mm
31197	Impression Coping 11mm and Replica Ø3.25
31241	Provisional Ti Abutment Ø3.25
31199	Neoss Mono Gold Abutment Ø3.25
31234	Neoss Mono Aesthetic Ti Abutment Ø3.25
31255	Neoss Burnout NeoLink Multi Ø3.25 – 2 pcs
31201	Prepable Ti Abutment 1mm 0° Ø3.25
31202	Prepable Ti Abutment 1mm 15° Ø3.25
31198	Implant Replica Ø3.25 – 5 pcs
31239	Laboratory Screw Ø3.25 – 1 pc
31240	Abutment Screw Ti Ø3.25 – 1 pc

Klinisk procedur

1. Ø3.25 implantatet från Neoss har utformats för att optimera implantatbehandling vid trånga kliniska utrymmen. Efter sedvanlig terapiplanering och diagnostik prepareras sätet med lambå eller flapless teknik. Borrsekvensen är enligt följande:

Borrsekvens

Ø2.2 Spiralborr
Ø2.85 Spiralborr
Ø3.0 Spiralborr (valfri vid hårt ben)

2. För att säkra optimal placering och skapa bra förutsättningar för en naturlig mjukvävnadsgenombång rekommenderas användning av försänkare (Countersink, # 41139). I mycket hårt ben bör användning av gängtapp (Screw Tap, # 41140) övervägas.

Temporär och final konstruktion

För Ø3.25 implantatet finns specifik läkdistanst och temporära komponenter. Till dessa används existerande instrument och mejslar.

Specifika Neolink Mono i guld och titan finns tillgängliga, samt raka och vinklade preparerbara distanser.

Protetik och tandtekniska procedurer finns beskrivna i manualen för Neoss Implant System (10516).



Nyckelkomponenter, den specifika Ø3.25 Borr/instrument brickan och etiketter är färgkodade i mörkblått. Ø3.25 implantatkit innehåller implantat, täckskruv och en läkdistanst med skruv.



Försänkare och gängtapp är lasermärkta med Ø3.25.



Förutom implantat, täckskruv och instrument så är avtryckstopp, replika och laborieringsskruv färgkodade i mörkblått.